


24er DeepWell Platte riplate SW, 10 ml

zentral zulaufender Boden, Polypropylen

SBS Format, Arbeitsvol: 50 µl - 9.9 ml

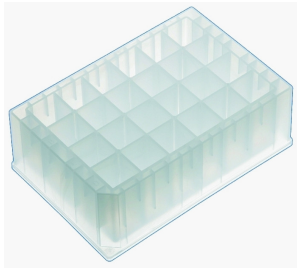

Packung à 20 Stück

Artikel-Nr.: 742926 | **Ritter** | Herstellernummer: 43001-0066

135,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: zentral zulaufend
Kategorie: 24er DeepWell Platte
Material: PP
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 20 Stück
Volumen: 10.0 ml
Well Form: eckig

riplate SW DeepWell Platten - Optimum an Lagerkapazität

Die Riplate® SW (= square wells) dienen vor allem der optimalen Raumaussnutzung zur Lagerung. Durch das SBS-Format der Riplate® sind die Außenmaße vorgegeben. Die zweckmäßige Formgebung des Innenraumes trägt somit entscheidend zum maximalen Aufnahmevermögen der Platte bei. Riplate® SW wird durch dünnwandige, parallel verlaufende Innenwände so definiert, dass pro Kavität das größtmögliche Probenvolumen für eine kontaminationsfreie Lagerung erreicht wird. Jede Riplate® SW ist mit einem alphanumerischen Koordinatensystem ausgestattet.

Analyseverfahren wie zum Beispiel die Chromatographie weisen kleinste Verunreinigungen nach. Riplate® SW wird aus diesem Grund zur einwandfreien und sicheren Analyse aus reinem Polypropylen ohne Zusätze wie Gleitmittel hergestellt. Das relativ große Volumen erlaubt das Schließen und Öffnen von Riplate® mit Noppendeckeln ohne Flüssigkeitsverdrängung und Kreuzkontamination.

riplate sw 10 ml - 24 Wells

- Gesamtvolumen: max. 10.0 ml / Well
- Arbeitsvolumen: 50 µl bis 9.9 ml
- Material: Polypropylen
- Optimale Raumaussnutzung durch rechteckige Kavitäten
- Gut ausgeformter V-Boden minimiert Probenverlust
- Niedrige Plattenhöhe bei gleichzeitig größerem Wellvolumen

Riplate® SW (= square wells) have been developed for optimal use of capacity when it comes to sample storage. Due to the SBS format, the outside dimensions of Riplate® are given. Form follows function: the construction of cavities is crucial for a maximum absorption of liquids. Thin-walled and parallel cavities ensure a maximum of contamination-free sample storage per well.

Every Riplate® SW has an alphanumeric marking.

Analytical methods as for example chromatography can detect lowest impurities. For this reason, Riplate® SW is manufactured out of pure polypropylene without lubricants for an immaculate and secure analysis. The relatively high volume allows closing of Riplate® with capmats without any liquid displacement and cross-contamination, towards comparable plates with lower volume from other manufacturers.

Riplate® SW 10 ml – 24 wells

- **Total volume:** max. 10.0 ml / well

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Working volume: 50 µl up to 9.9 ml
- Centrally tapered bottom
- Capmat 24 for a leak-proof closure available