
FlashGel Recovery Kit

ohne FlashDoc

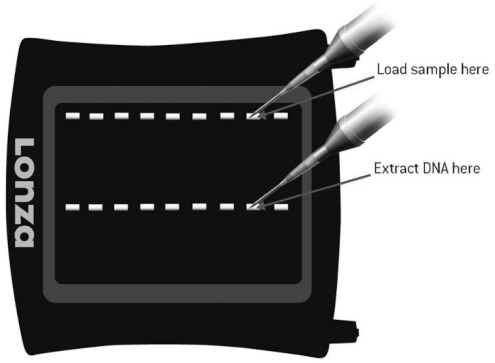

Lonza

1 Stück

Artikel-Nr.: 857064 | Lonza | Hersteller-Nr.: 57064

563,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: DNA Recovery-Kassetten und Reagenzien
Kategorie: FlashGel System
Produkttyp: DNA Extraktionskit
Trennbereich: 50 bp - 4 kb
Verpackung: 1 Stück

DNA-Recovery in 5 Minuten

Die Vorteile:

- Von der Gelbeladung bis zum Recovery der DNA in 5 Minuten
- Probenrückgewinnung direkt aus der Gelkassette ohne Ausschneiden der Gelbanden und ohne zusätzliche Aufreinigung
- Visualisierung der Proben ohne schädigendes UV-Licht
- Effizienz der Probenrückgewinnung: 80-100 %

Kurzanleitung:

1. Gelkassette in die FlashDoc einsetzen
2. Ein Pre-Load der Wells mit destilliertem oder deionisiertem Wasser durchführen
3. Die obere Well-Reihe mit den Proben beladen
4. Die Proben bis zur zweiten Well-Reihe laufen lassen
5. Den Gellauf stoppen und den FlashGel Recovery Puffer zugeben
6. DNA aus den Wells der Zweiten Reihe herauspipettieren

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Systemkomponenten:

- FlashGel Recovery Kassette 1.2%, 8+1 Well, zweizeilig, Packung à 9 Gele
- FlashGel QuantLadder (250 µl)
- FlashGel 5X Loading Dye (1 ml)
- FlashGel Recovery Puffer (2 x 500 µl)
- Visualization Glasses
- FlashGel Mask

ACHTUNG die FlashDoc ist NICHT in diesem Paket sondern separat erhältlich!

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri