


IncuShaker 10 LR (55H2012-E)

+ MAGIC Clamp Plattform (55H1010-MR)

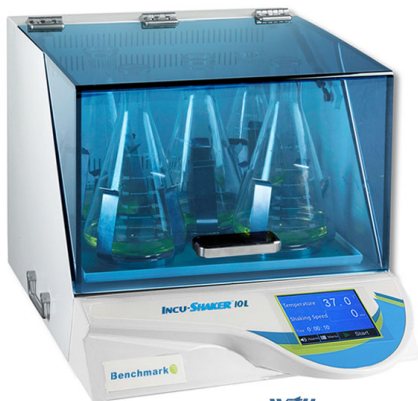

with
MAGIC
CLAMP
PATENTED

%

1 Set
Artikel-Nr.: A55H2012-E | **Aktion**

8.945,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- Geschwindigkeit: Variabel, 30 bis 300 rpm
- Orbit: 19 mm / 3/4 in.
- Temperaturbereich: Raumtemperatur minus 15 bis 60 °C
- Temperaturinkrement: 0.1 °C
- Temperaturgenauigkeit: ± 0.1 °C
- Uniformität: ± 1.25 °C
- Geschwindigkeitsinkrement: 1 rpm
- Plattform-Abmessungen: 45 x 45 cm
- Abmessungen: (B x L x H) 51 x 65 x 47 cm
- Gewicht: 55 kg
- Höhe mit geöffnetem Deckel: 96.5 cm
- Timer: 1 Min. bis 48 Stunden / Dauerbetrieb
- Anschlusswerte: 230 V, 50-60 Hz, 450 W
- Garantie: 2 Jahre

Beschreibung

Aktionsartikel IncuShaker 10 LR + MAGIC Clamp Plattform (55H1010-MR)

Incu-Shaker™ 10LR ist ein leistungsstarkes Gerät, das für hohe Arbeitsbelastungen und den Dauereinsatz ausgelegt ist. Seine hervorragende Temperaturgenauigkeit und -gleichmäßigkeit wird durch die firmeneigene Wärmeverteilungstechnologie unterstützt, die sicherstellt, dass die Temperaturen in der gesamten Kammer genau eingehalten werden. Schichtungsbedingte Inkonsistenzen werden auf ein vernachlässigbares Maß reduziert und die

gewählte Temperatur wird auch in den Ecken präzise auf 0,25% gehalten.

Der leistungsstarke bürstenlose Induktionsantrieb ist für jahrelangen störungsfreien Betrieb ausgelegt, auch unter Dauereinsatzbedingungen mit hohen Lasten. Geräusche und Vibrationen werden durch ein fortschrittliches, computergestütztes Motorisolationssystem minimiert. Wie andere Incu-Shaker-Modelle ist auch der 10LR auf Langlebigkeit ausgelegt.

Eine standardmäßige Gummimattenplattform ist im Lieferumfang enthalten und eignet sich ideal für Gewebekulturflaschen, Petrischalen, Färbeschalen und andere flache Gefäße. Die praktische MAGic Clamp™-Plattform ist auch für Erlenmeyerkolben und Reagenzglasgestelle erhältlich. Die einzigartige, magnetische Befestigungsmethode (PATENTIERT) ist die einfachste Möglichkeit, sofort zwischen Kolbenklemmen unterschiedlicher Größe zu wechseln.